


Luminometer PD 10

Das neue PD-10 - das ATP/AMP Messgerät für

- tägliche, schnelle Hygiene Kontrolle:
- Organismen- und Lebensmittelreste-Nachweis
via ATP und AMP in weniger als einer Minute
- sehr schnelle Überprüfung von sterilen Lösungen
- Stufenkontrollpläne in Lebensmittelbetrieben
- die Überprüfung von z.B. Sterilbänke...



- ✓ eine HACCP Konzept Umsetzung
- ✓ sehr handlich
- ✓ leicht
- ✓ einfachster Transfer der Daten zum Computer (Microsoft Excel)
- ✓ kostengünstig
- ✓ sehr schnell (15 Sekunden)

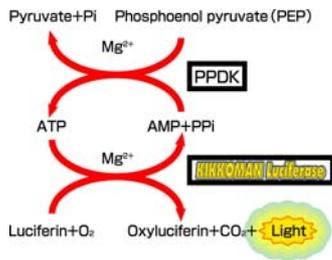

Spezifikationen:

Geringes Gewicht	360 g
sehr handlich	80 x 203 x 50 mm
Nachweisgrenze	10 ⁻¹⁵ mol ATP/Test
Messzeit	10 Sekunden/Probe
Speicher	200 Meßergebnisse
Energie	Batterie oder Adapter
Computer Transfer	Via RS 232C Interface



LuciPac™ W der Swab zum PD 10

- Gebrauchsfertig
- Steril
- Haltbarkeit: 1 Jahr
- Für Flüssigkeiten und Oberflächen
- Patentierte neue Technologie
- Stabiles Signal



Das Konzept

Probe nehmen: Wischen/Tauchen	 15 Sekunden
ATP/AMP freisetzen	
Mischen	
Messen	
Computer Transfer (optinal)	



Produkt	ID-Nummer
Lumitester™ PD-10	1 002 651
LuciPac™ W 100 Stück (10 x 10)	1 002 666